



HAQ哈克医疗有限公司
HAQ Surgical (PVT)., ltd



哈克口腔正畸工具

HAQ Orthodontic instruments



泪滴钳

Tear drop thermal forming plier

Item # HQ-02005-51



配合其他粘接附件，通过牵引使牙齿伸长直至与牙套贴合



泪滴形牵引钩的角度和深度可以根据弹性牵引的方向自由调整

可以在透明牙套任何需要弹性牵引的龈方边缘钳出泪滴形缺口，泪滴形状的缺口可以很好的将弹性皮圈勾住，让患者更加容易使用弹性牵引



垂直钳

Vertical notch thermal forming plier

Item # HQ-02005-53



利用垂直钳在扭转牙近中或远中线角夹出凹陷来提高对扭转牙的控制。

垂直钳可以在扭转牙的颊 / 舌侧的近中或远中夹出凹陷来决扭转牙的过矫正。也可以分别在扭转牙的颊舌侧相对的位置压出一对凹陷，形成一个扭转力偶



打孔钳

Hole thermal forming plier

Item # HQ-02005-52



打孔钳可以在矫治器龈方边缘打一个半圆形



半圆的缺口可以放在任何需要粘结舌侧扣或者托槽的牙位上

打孔钳可以剪出一个半圆形缺口，为牙面粘接舌侧扣提供空间，从而不影响牙套的佩戴；另外，剪掉需要软组织缓冲的部位，防止牙套压迫牙龈

水平钳

Horizontal notch thermal forming plier

Item # HQ-02005-54



通过在任意牙齿的唇侧或舌侧龈缘处夹出凹陷，来实现对个别牙齿根转矩的加力



在倒凹处或者附件龈方夹出凹陷，增加透明牙套或保持器的固位

水平钳通过在矫治器上夹出凹陷来实现个别牙齿根转矩的加力。另一个用途可以在倒凹处或者附件龈方夹出凹陷，增加透明牙套或保持器的固位




环形热成形钳

Cicular thermal forming plier

Item # HQ-02004-84

增加已有凹面深度，提升钩的高度

Designed for deepening concave

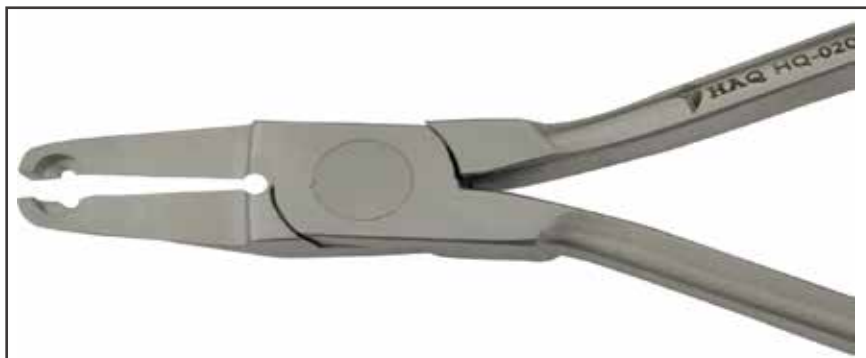

槽沟热成形钳

Groove thermal forming plier

Item # HQ-02004-82

在给透明矫治器添加了牵引钩后，能够继续给透明矫治器添加槽沟状倒凹，以便把持住橡皮圈，不至于倒时脱出

Designed for making grooves on clear appliances, to hold the elastic, prevent it falling off



微堤热成形钳

Micro Ramp thermal forming plier

Item # HQ-02004-83

给透明矫治器添加突起，用于关闭间隙

Designed for a gibbosity on clear appliances to close space



气泡热成形钳

Bubble thermal forming plier

Item # HQ-02004-81

为牙齿移动，给透明矫治器添加额外的空间

Designed for an extra space on clear appliances for tooth movement

器械维护保养小提示:

用钻石打磨的锋刃和轨道成型的接头让您每个操作都可以体验到锋刃的锋利及精确

定期地修磨切断钳可以大范围地降低器械的破损率
平均每把切断钳需要每9~12个月被修磨一次



Distal End Cutter (Safety Hold) w/Long Handle

Long handle option that can easily cut all types of wires ranging from .012" (.30 mm) to .021" x .025" (.53 mm x .64 mm).

通用末端切断钳 (加长柄)

Item # **HQ-02005-02**

弓丝范围自 .012" / .30mm 至 .021" X .025" (.53mm X .64mm) 不等



Distal End Cutter (Safety Hold)

Shear cuts hard wire, and can easily cut all types of wires ranging from .012" (.30 mm) to .021" x .025" (.53 mm x .64 mm).

末端切断钳

Item # **HQ-02005-01**

弓丝最大可达

.021" x .025" / .53mm X .64mm

Hard Wire Cutter, 15° Angled

Designed to cut hard wire up to .022" x .028" (.56 mm x .71 mm).

硬弓丝切断钳 (15°)

Item # **HQ-02005-03**

硬弓丝可达 .022" X .028" (.56mm X .71mm)。15°

偏移钳尖



Multi-Use Cutter

Designed to cut soft-wire pins and ligature wire up to .012" (.30 mm).

硬丝切断钳 (直头)

Item # **HQ-02005-06**

硬弓丝可达 .012" (.30 mm).



多用途切断钳 Item # **HQ-02005-06**

Micro Mini Pin & Ligature Cutter

软弓丝引针和结扎丝可达.01"/.030mm Perma Sharp 钳尖



微型温氏钳 Item # **HQ-02004-02**

Weingart Pliers

多功能钳，钳端缩小20%，用于弓丝放置和移除



De La Rosa 钳 Item # **HQ-02004-40**

De La Rosa

弓丝范围自 .021"×.025"(.55mm × .64mm)



舌侧细丝切断钳 Item # **HQ-02005-43**

Lingual Ligature Cutter

弯头，主要用于舌侧剪切软态结扎丝或橡皮圈等，最大剪切丝径0.41mm



转矩形成钳（单头） Item # **HQ-02004-41**

Torque Bending plier (single Head)

用于方丝弓某一特定分段转矩，单、双头配合使用



转矩形成钳（双头） Item # **HQ-02004-42**

Torque Bending plier (Double Heads)

用于方丝弓某一特定分段转矩，单、双头配合使用



步骤1 Step 1



步骤2 Step 2



步骤3 Step 3



步骤4 Step 4



Jarabak 钳

Jarabak Pliers

Item # HQ-02005-16

凹槽式细丝钳，用于精确弯曲与闭合圈环。锯齿状表面能夹住的弓丝可达 .020" / .51mm



带凹槽的细丝鸟嘴钳

Light Wire Pliers With Groove

Item # HQ-02005-19

能弯制精确圈环的细丝可达 .020" / .51mm
凹槽可以固定和复制圈环



舌弓成型钳

Lingual Arch Forming Pliers

Item # HQ-02005-22

在 .030" / .76mm 和 .036" / .91mm 舌弓丝上成型双后弯和三后弯



Adams 钳子

Adams Pliers

Item # HQ-02004-32



Tweed 成型钳

Tweed Loop Forming Pliers

Item # HQ-02005-20

直径为 .045"、.060" 和 .075" (1.14mm、1.52mm 和 1.91mm) 的圈环成型钳。
用于在 .022" x .028" (.56mm x .71mm) 的弓丝上



结扎丝形成钳

Ligature Bending plier

Item # HQ-02004-35



鸟嘴钳

Bird Beak Pliers

Item # HQ-02005-18

圈环成型钳，能弯制圆形弓丝可达 .030" / .76mm
锥形钳尖和反向钳尖为 .025"



转矩成型钳

Rectangular Arch Forming Pliers

Item # HQ-02005-21

放置第一、第二和第三顺序弯。 .070" / 1.78mm 钳刃宽度




Marcotte 圈环钳

Marcotte Loop Forming Pliers

Item # HQ-02005-50

成型螺旋圈环和 T 形圈环。无直角。可防止弓丝的应力折断

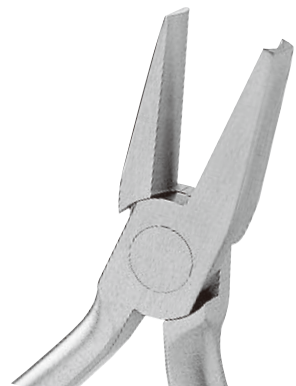

弓丝弯制钳
Hollow Chop Contouring Pliers
Item # HQ-02005-23
精细勾弯各种尺寸的弓丝




三叉钳
NiTi Three Jaw Pliers
Item # HQ-02005-26
NiTi弯型钳
三叉成形和勾弯各种弓丝，
特别适用于镍钛弓丝



迷你切断钳
Bird Beak Pliers With Cutter
Item # HQ-02005-27
软弓丝引针和结扎丝
可达 .012"/.30mm
Perma Sharp® 钳尖
细长头外形



Nance成型钳
Nance Loop Forming Pliers
Item # HQ-02004-31

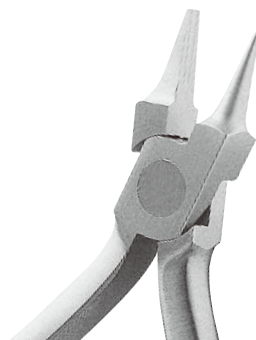

日月钳
Bird Beak Pliers
Item # HQ-02005-18



长头锥形鸟嘴钳
Long Tapered Bird Beak Pliers
Item # HQ-02005-28
可弯制多种圆滑圈环，
达 .030"/.76mm



V型弯钳
Stop (V-Bend) Pliers
Item # HQ-02005-25
在弓丝上制作V形弯，包括镍
钛弓丝，以防止弓丝移位



游离钩专用钳
Crimpable Hook Placement
Item # HQ-02004-45
用于锁定游离牵引钩于弓丝的
某一位置上，锁定操作轻松省力



Hammerhead® 镍钛丝回弯钳
NiTi Distal Cinch Back Pliers
Item # HQ-02005-29
多用途NiTi弯制钳，弯制可
达.0021" 的NiTi
结扎NiTi无需加热



温氏钳（万能钳）

Universal pliers

Item # HQ-02005-37

细长头的尖嘴钳可触及更多区域，功能更广泛。20° 角




带环去除钳（长头）

Posterior Band Removing Pliers, Long

Item # HQ-02005-12

钳尖偏移对齐并带咬合垫，用于去除带环

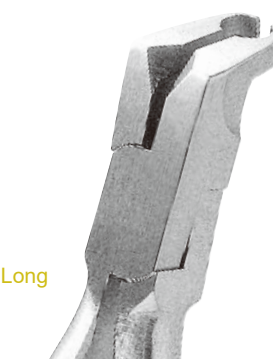

角状托槽去除钳

Angulated Debonding Pliers

Item # HQ-02005-14

高角度设计可用于从前后牙齿上去除各种类型托槽



霍氏钳（直头）

Weingart Pliers

Item # HQ-02004-02

类似678-203，但钳尖角度为40°，以便接近舌部及其他难以触及的区域



带环去除钳（短头）

Posterior Band Removing Pliers

Item # HQ-02005-12S

钳尖偏移对齐并带咬合垫，用于去除带环



牙冠和带环轮廓钳

Crown & Band Contouring Pliers

Item # HQ-02005-15

儿童预成冠专用钳，用于安装不锈钢牙冠



粘合剂去除钳

Adhesive Removing Pliers

Item # HQ-02005-11

去除附加装置后清除大块的复合材料



托槽去除钳

Debonding Pliers

Item # HQ-02005-13

用于所有类型的钢制、陶瓷和塑胶托槽



带环卷边钳

Band Contouring Plier

Item # HQ-02005-33

儿童预成冠专用钳，薄薄的钳尖能够轻松插入臼齿和尖齿带环



托槽定位器

Classic Boone Gauge

Item # **HQ-02081-03**

不锈钢定位标准平面放置在牙齿切端或牙合面，固定标度钉标记托槽定位高度，分前牙和后牙两种形式



.018" Item # **HQ-02081-01**

.022" Item # **HQ-02081-02**



持针钳

Mathieu Fine Tip

Item # **HQ-02008-05**



从殆面观，将结扎丝捆绑在托槽上

分牙圈放置钳

Separator placing plier


Item # **HQ-5345-02**

前端弯曲，能方便的将分牙用橡皮圈置入磨牙接触点下方



正畸带环就位器

Band Seater

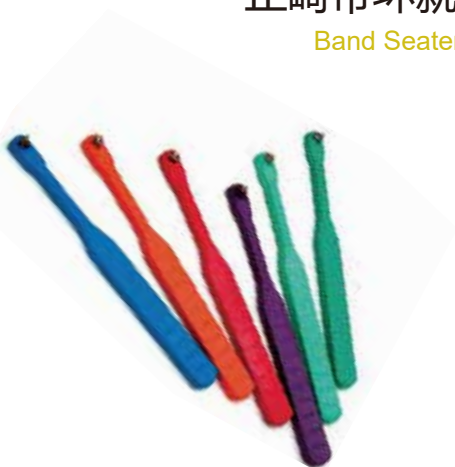

Item # **HQ-02081-04**



Item # **HQ-02081-05**



托槽镊

Bracket Tweezer

Item # **HQ-02081-06**



Item # **HQ-5004-01**



Item # **HQ-5004-11**



牙正畸结扎器
Item #HQ-5018-03



结扎丝导向器/带环推压器
Item #HQ-5018-13



大型充填器/除橡皮圈钩
Item #HQ-5018-12



充填器/接扎丝就位器
Item #HQ-5018-11



洁治器/带环推子
Item #HQ-5018-10



接扎丝就位器/带环推子
Item #HQ-5018-09



舌侧结扎丝就位器
Item #HQ-5018-08



充填/除橡皮圈钩
Item #HQ-5018-07



接扎丝就位器/除橡皮圈钩
Item #HQ-5018-06



带环推子
Item #HQ-5018-05



除橡皮圈钩/接扎丝就位器
tem #HQ-5018-02



接扎丝就位器/除橡皮圈钩
Item #HQ-5018-01



tem #HQ-5018-04



方丝弓成型器

Arch Turret

Item #HQ-02080-01-02-03



正畸辅助器械套装

器械维护保养小提示

定期地修磨切断钳可以大范围地降低器械的破损率——平均每把切断钳需要每9~12个月被修磨一次。

器械清洁

所有器械均应在杀菌前清洁。应当使用无腐蚀性的低泡中性清洁剂清洗。可以使用超声波清洗机清洁器械，以防止手工擦拭可能导致的手部受伤。

器械处理中的注意事项

为了获得最佳效果, 建议使用超声波进行器械清洗, 使用高压蒸汽灭菌器进行杀菌。切忌使用去污或除垢剂清洁器械。切忌在器械附近喷洒表面消毒剂。只使用核准的润滑剂(切忌使用WD-40或机头润滑油)。

不锈钢器械

虽然不锈钢具有卓越的抗腐蚀能力, 但如果暴露于超过推荐浓度的化学试剂或某些化学试剂之中, 也会变色或出现腐蚀。

不锈钢不应暴露于如下化学试剂中: 次氯酸钠(家用漂白剂)、酒石酸(去污和除垢剂)、氯化铝、氯化钡、二氧化汞、氯化钙, 碳酸、漂白粉、柠檬酸、达金氏溶液、氯化亚铁、来沙尔、氯化汞、汞盐、苯、高锰酸钾、硫氰酸钾或氯化亚锡。

决不能使用如下化学试剂清洁不锈钢: 王水、氯化铁、硫酸、盐酸或碘。



HAQ Surgical (PVT)., ltd

HAQ哈克医疗有限公司

Muhallah Loharan Wala Khou, Muzaffar Pur,
Near Roas Road (Postal Code: 51310) Sialkot Pakistan
PH NO# 0092323-5008238, EMAIL: info@haqsurgical.com
www.haqsurgical.com
座机号码: 029-89185842